

Leg extension / Curl Rehab

Travail des muscles ischio-jambiers et quadriceps

HUR Premium Line est la gamme la plus développée de HUR. Elle propose un équipement de qualité adapté à l'exercice des seniors et à la rééducation.

La gamme HUR permet un entraînement individuel sans risque grâce à la résistance pneumatique. Il est possible de paramétrer une résistance de départ proche de zéro avec des incréments de 100 g/1 kg. L'appareil possède des limiteurs d'amplitude.

La machine Leg Extension/Curl permet de travailler efficacement et en toute sécurité les muscles ischio-jambiers et les quadriceps. Elle est équipée de limiteurs d'amplitude et permet de tester la force isométrique.



Les + produits

Double fonction

La double fonction permet de travailler les groupes musculaires opposés sans changer de machine. Le choix de l'exercice s'effectue grâce à un bouton poussoir (machines analogiques) ou avec l'écran tactile (machines SmartTouch).

Un produit sécurisé

Les limiteurs d'amplitude permettent de limiter l'amplitude des mouvements. Cette fonction est particulièrement utile lors de la rééducation ou si l'utilisateur souffre d'un handicap durable. Le produit dispose également d'une ceinture qui apporte un maintien supplémentaire, ainsi que d'une plaque anti dérapante.


Mesures isométriques

En option, la machine permet de prendre des mesures isométriques telles que la force maximale et l'équilibre musculaire grâce au dispositif d'enregistrement Performance Recorder

Caractéristiques techniques (STE5530-HI5-MD)

Fonctionnalités	Mécanisme de résistance à air/pneumatique avec la Transmission naturelle® / Système de transmission sûr et fermé/ Poignées faciles d'accès/ Soutien dorsal à réglage électrique/ Bras de levier à réglage électrique/ Sangles de jambe/ Ceinture de sécurité/ Limiteurs d'amplitude/ Fixation du capteur de test isométrique/ Coussin de nuque/ Amplitude de mouvement et puissance.
Résistance	0 - 36 kg Leg extension 0 - 36 kg Leg Curl Réglage de la résistance par incréments de 0,5 kg manuellement et par incréments de 0,1 kg dans le programme d'entraînement. Double fonction.
Poids des bras de levier	4kg
Pression d'entrée maximale	9.9 bar
Commandes	Informatisé à écran tactile. Réglage de la résistance soit automatiquement en fonction du programme d'entraînement, soit manuellement en appuyant sur les boutons '+' ou '-' de l'écran.
Alimentation électrique	24VDC/150W, 100-240VAC/50-60Hz
Consommation	Appareil en veille : 4,1 W Appareil actif : environ 7,7 W - 33,6 W
Dimensions (Larg/Long/Haut)	112 x 155 x 140 cm
Poids	environ 104kg
Certification	MDR (2017/745) Class1

MUSCLES TRAVAILLES

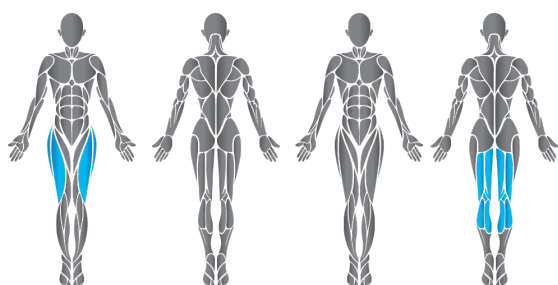

OPTIONS

- ✓ **COUSSIN DE SIEGE** : permet d'ajuster la position d'exercice en fonction de la morphologie de l'utilisateur



HUR propose des dispositifs avec des fonctionnalités adaptées à la rééducation, l'exercice et l'entraînement.

Médimex

ÉVALUATION - RÉÉDUCATION - PERFORMANCE

1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Standard. 04 78 34 32 48

info@medimex.fr - www.medimex.fr

02-22