

Dip/Shrug Easy Access

Travail des muscles des bras, des épaules et du dos

HUR Premium Line, est la gamme la plus développée de HUR. Elle propose un équipement de qualité adapté à l'exercice des seniors et à la rééducation.

La gamme HUR permet un entraînement individuel sans risque grâce à la résistance pneumatique. Il est possible de paramétrer une résistance de départ proche de zéro avec des incréments de 100 g/1 kg.

L'appareil à double fonction Dip / Shrug permet un entraînement ciblé des muscles des épaules, des bras et du dos. Cette machine est équipée de limiteurs d'amplitude et d'une possibilité de test de force isométrique. La machine peut être utilisée avec un fauteuil roulant.



Les + produits

Double fonction et accès fauteuil

La double fonction permet de travailler les groupes musculaires opposés sans changer de machine. L'appareil permet un accès direct en fauteuil roulant pour un entraînement simple et accessible.

Un produit sécurisé

Les limiteurs d'amplitude permettent de limiter l'amplitude des mouvements. Cette fonction est particulièrement utile lors de la rééducation ou si l'utilisateur souffre d'un handicap durable. Le produit dispose également d'une plaque anti dérapante.


Mesures isométriques

En option, la machine permet de prendre des mesures isométriques telles que la force maximale et l'équilibre musculaire grâce au dispositif d'enregistrement Performance Recorder

Caractéristiques techniques (ST9125)

Fonctionnalités	Mécanisme de résistance à transmission naturelle/ Système de transmission sûr et fermé/ Ceinture de sécurité/ Plaque de base/ Bras de levier réglables horizontalement/ Limiteurs d'amplitude/ Fixation du capteur de test isométrique/ Amplitude de mouvement et puissance.
Résistance	0-102 kg Plongée 0-92 kg Haussement d'épaules, Réglage de la résistance par petits incréments. Double fonction
Commandes	Ordinateur à écran tactile. Réglage de la résistance soit automatiquement en fonction du programme d'entraînement, soit manuellement en appuyant sur les boutons «+» ou «-» de l'écran.
Alimentation électrique	24VDC/150W, 100-240VAC/50-60Hz
Châssis	Cadre soudé en acier léger. Vis et boulons en acier inoxydable. Surface durable recouverte d'un revêtement en poudre. Cadre de base protégé par une surface antidérapante en aluminium. Couleurs standard : blanc, gris et noir.
Dimensions (Larg/Long/Haut)	107 x 130 x 108 cm
Poids	environ 72kg
Certification	MDR (2017/745) Class 1

MUSCLES TRAVAILLES

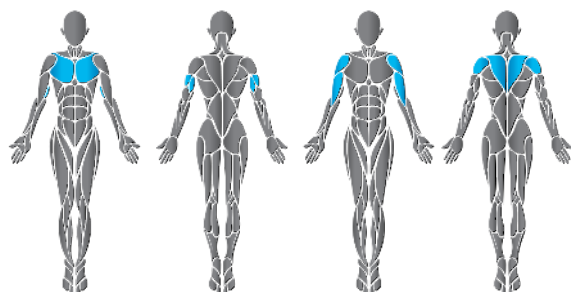

OPTIONS

- ✓ **GANTS DE PREHENSION** : permet de maintenir une bonne prise pendant l'exercice, convient aux personnes souffrant d'une perte d'adhérence ou avec des articulations douloureuses
- ✓ **BOUTONS «CHAMPIGNON»** : La résistance est réglée à l'aide de gros boutons poussoirs qui rendent le réglage facile et sûr. Uniquement pour les appareils analogiques.



HUR propose des dispositifs avec des fonctionnalités adaptées à la rééducation, l'exercice et l'entraînement.

Médimex

ÉVALUATION – RÉÉDUCATION – PERFORMANCE

1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Standard. 04 78 34 32 48

info@medimex.fr - www.medimex.fr

03/23